

Oxivir Excel Wipe Acti


Lingettes nettoyantes-désinfectantes pour dispositifs médicaux non invasifs et surfaces non poreuses

Description

Oxivir Excel Wipe Acti, issu de la technologie AHP, est le produit idéal pour nettoyer et désinfecter en une seule étape. Une lingette prête à l'emploi pour tous les domaines d'utilisation pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures ainsi que les surfaces des dispositifs médicaux non invasifs (pour un usage professionnel uniquement).


Propriétés principales

- Lingette prête à l'emploi, produit idéal pour tous les domaines d'utilisation, y compris les secteurs de la santé, les environnements non médicaux et le secteur alimentaire
- Virucide complet
- Action rapide contre un large spectre de virus, bactéries et levures
- Nettoyage supérieur grâce à un système de tensioactifs haute performance
- Sans parfum
- Sans rinçage
- Se décompose en eau et en oxygène
- Biocide approuvé BPR
- Dispositif médical certifié

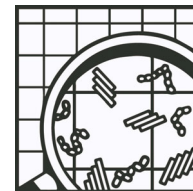

BPR
APPROVED

 **Diversey Europe Operations B.V.**
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com

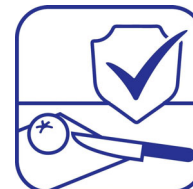

Oxivir Excel Wipe Acti

Bénéfices

- Oxivir Excel Wipe Acti offre une efficacité à large spectre contre les bactéries, les levures et les virus avec des temps de contact courts temps, assurant les plus hauts niveaux de désinfection contre de multiples agents pathogènes préoccupants.
- Approuvé BPR et largement testé selon les Normes Européennes.
- Oxivir Excel Wipe Acti dispose d'une revendication virucide complète, incluant une efficacité prouvée contre les virus non enveloppés tels que la poliomyélite, l'adénovirus, le norovirus murin, ainsi que contre les virus enveloppés tels que le coronavirus, le virus Vaccinia, le VIH, le HBV, le HCV et la grippe.
- Oxivir Excel Wipe Acti offre une forte performance de nettoyage grâce à de puissants tensioactifs, ce qui en fait non seulement un excellent désinfectant mais aussi un excellent nettoyant.
- La formulation AHP est douce pour les surfaces, prolongeant la durée de vie des équipements et ne laissant aucun résidu agressif sur les surfaces.
- Oxivir Excel Wipe Acti convient à un usage quotidien pour le nettoyage et la désinfection des surfaces dures, ainsi qu'à une utilisation dans les zones à fort contact dans le commerce de détail, l'éducation, la restauration, les établissements de soins de longue durée et d'autres secteurs, ainsi que dans les zones à haut risque des hôpitaux telles que les salles d'opération (OR), les unités de soins intensifs (ICU), les unités de soins intensifs néonataux (NICU) et les chambres des patients.
- Aucun EPI requis, sauf en cas d'utilisation prolongée.

Mode d'emploi

Lingette prête à l'emploi, aucune dilution nécessaire, utiliser à température ambiante :

- Retirer les salissures grossières.
- Ouvrir le couvercle, prendre une lingette et refermer le couvercle.
- Appliquer le produit en mouillant entièrement la surface non poreuse et/ou le dispositif médical non invasif.
- Laisser agir pendant 5 minutes.
- Laisser sécher à l'air libre. Aucun rinçage de la surface n'est requis.
- Se laver les mains après manipulation.

Taux d'application : 1,5 m² par lingette.

Données techniques

Aspect:	Lingettes blanches
Odeur:	Neutre
Valeur pH (pur):	<2
Durée de conservation:	2 ans après la production (date d'expiration : voir l'emballage) 28 jours après ouverture
Substance active:	0,36 % de peroxyde d'hydrogène

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Oxivir Excel Wipe Acti

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Des instructions complètes concernant la manipulation et l'élimination de ce produit sont fournies dans une Fiche de Données de Sécurité distincte ; sds.diversey.com. Manipuler en respectant les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Tenir à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Ne pas mélanger avec d'autres produits sauf indication contraire de Diversey. Conserver dans les récipients d'origine fermés, à l'abri des températures extrêmes. Le produit n'est pas destiné à être réutilisé. Réservé aux utilisateurs professionnels/spécialistes.

Attention

Stocker dans la plage de température suivante : 6°C - 35°C. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Conserver à l'abri de la lumière du soleil. Manipuler en respectant les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Tenir à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. Le produit n'est pas destiné à être réutilisé. Avertissement : Peut être corrosif pour les métaux.

Équipement de protection individuelle

Des conseils complets sur les EPI pour ce produit sont fournis dans une fiche de données de sécurité séparée ; sds.diversey.com.

EPI : Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. **Protection des mains** : Rincer et sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire.

Considérations relatives à l'élimination

Des conseils complets sur l'élimination de ce produit sont fournis dans une fiche de données de sécurité séparée ; sds.diversey.com.

Compatibilité du produit

Oxivir Excel Wipes Acti est destiné à être utilisé comme désinfectant pour surfaces dures, y compris les surfaces dures de dispositifs médicaux non invasifs.

Dans les conditions d'utilisation recommandées, Oxivir Excel Wipes Acti convient aux surfaces telles que l'acier inoxydable, le chrome, le vinyle, les tissus en nylon, les surfaces laminées, le verre, le caoutchouc, ainsi que les plastiques durs et flexibles (polypropylène, polyuréthane, polyéthylène, PVC, acrylique, fibre de verre et polycarbonate).

Les utilisations autres que celles spécifiées ne sont pas recommandées.

Oxivir Excel Wipes Acti n'est pas destiné à être utilisé sur des dispositifs médicaux invasifs. **Ne pas mélanger avec d'autres produits. Non destiné aux surfaces poreuses ou sensibles aux acides.**

Oxivir Excel Wipe Acti

Données microbiologiques

Domaine d'utilisation : TP2 Soins de santé dans des conditions de saletés, TP2 Hors soins de santé dans des conditions de saletés ; TP4 Surfaces en contact avec des aliments dans des conditions de saletés

Application	Revendications	Normes	Micro organismes	Dilution	Temps de contact
Nettoyage avec une lingette	Bactéricide	EN 13727 EN 1276 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	Prêt à l'emploi	5 min
	Levuricide	EN 13624 EN 1650 EN 16615	C. albicans		
	Virucide	EN 14476	Adénovirus, norovirus murin, poliovirus		

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables, conformément aux exigences du règlement européen sur les détergents (EC 648/2004).

Certifications

- Biocide : BPR EU-0032483-0003 1-3
- Organisme notifié pour les dispositifs médicaux : CE0044

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
9316224	OXIVIR EXCEL WIPES ACTI 12X100PC W4707	Wipes

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.04/12/2025 fr-FR (K02979)